

補聴器 HB-T1D / T1E / T1S 使い方ガイド

- 補聴器に同梱されている「取扱説明書」を必ずご覧になり、正しくお使いください。
- お求めの販売店で補聴器の設定を記入してもらってください（選択された設定の□に☑チェックをいれてください）。

初めに「電源の遅延機能」の設定を確認してください。

電源の遅延機能：□18秒／□12秒／□6秒／□無効
6秒、12秒または18秒に設定している場合、電池ホルダーを閉じてから、設定時間が経過した後に音が出ます。

電池の入れ方

No. HAM00008-02

- 補聴器用空気電池 PR44（675）をご使用ください。



電池に貼られているシールをはがします。

- 電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。
- 電池はシールをはがして、1分以上経過してからご使用ください。



電池ホルダーを完全に開きます。



電池ホルダーに電池を入れます。

- 補聴器の電池ホルダーの“+”表示と空気電池の“+面”側が一致するように入れます。



電池ホルダーをわずかに開いた状態にします。
この状態で耳へつけます。

耳へのつけ方・電源の入れ方

ヒント 電池ホルダーを閉じていてもハウリング（ピーピー音）が鳴らない場合や電源の遅延機能を「6秒、12秒、18秒」にしている場合は、**耳へつける前に電池ホルダーを完全に閉じていただけます。**

耳せんの場合



補聴器を耳にかけます。



チューブの曲がったところを持って、耳せんをゆっくりと耳あなに入れます。



電池ホルダーを完全に閉じると、電源が入ります。



適切に装用した状態です。

イヤモールドの場合



チューブの曲がったところを持って、イヤモールドをゆっくりと耳あなに入れます。



補聴器を耳にかけます。



電池ホルダーを完全に閉じると、電源が入ります。



適切に装用した状態です。

電源の切り方・耳からの外し方



電池ホルダーをわずかに開いて電源を切ります。



チューブの曲がったところを持って、ゆっくりと耳から外します。

電池の取出し方

使わないときは必ず電池を取出してください。




電池ホルダーを完全に開きます。



マグネット付きブラシで電池を取出します。


各部の名称

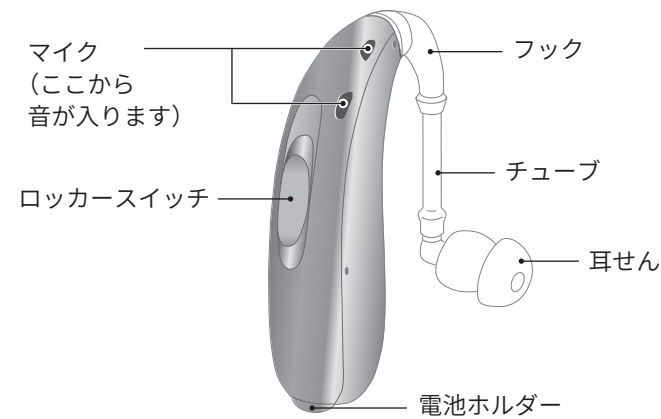


リモコンの使い方

- リモコンは別売品です。

音量の調節

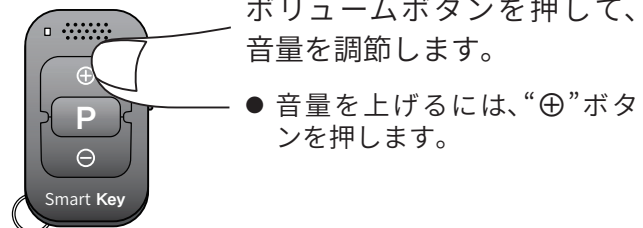


- ボリュームボタンを押して、音量を調節します。
- 音量を上げるには、“+”ボタンを押します。

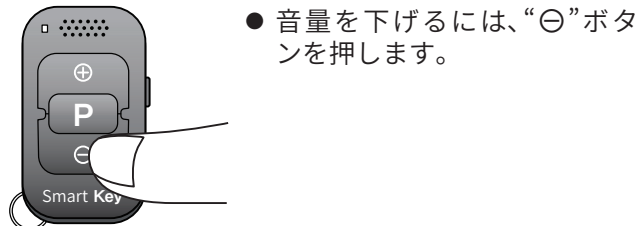


- 音量を下げるには、“-”ボタンを押します。

プログラム（メモリー）の切り替え

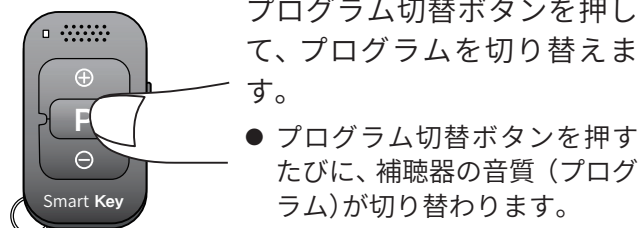

- プログラム切替ボタンを押して、プログラムを切り替えます。
- プログラム切替ボタンを押すたびに、補聴器の音質（プログラム）が切り替わります。


スリープモード（ミュート）

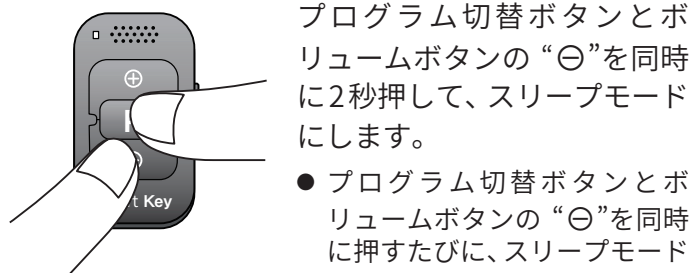

- プログラム切替ボタンとボリュームボタンの“-”を同時に2秒押して、スリープモードにします。
- プログラム切替ボタンとボリュームボタンの“-”を同時に押すたびに、スリープモード／スリープモード解除が切り替わります。

ロッカースイッチ

ロッカースイッチの押し方の例

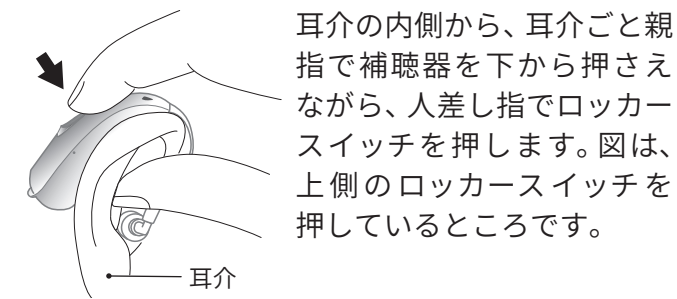

□ プログラム（メモリー）の切り替え

- 上部のロッカースイッチを押して／2秒間押してプログラムを切り替えます。
- 上部のロッカースイッチを押すとプログラムが昇順に切り替わります。（1→2→3→4→1・・・）
- 下部のロッカースイッチを押すとプログラムが降順に切り替わります。（1→4→3→2→1・・・）

□ 音量の調節

- 上部のロッカースイッチを押して／2秒間押して音量を調節します。
 - 上部のロッカースイッチを押すと音量が大きくなります。
 - 下部のロッカースイッチを押すと音量が小さくなります。
- ※ 相手の話し声の大きさや環境に応じて、調節してください。

□ ストリーミング状態

- ロッカースイッチを押して／2秒間押してBluetooth® 機器とのストリーミング状態にします。

□ スリープモード（ミュート）

- スリープモードにする
ロッカースイッチを4秒間押して、スリープモードにします。
- スリープモードを解除する
スリープモードのときにロッカースイッチを4秒間押して、スリープモードを解除します。スリープモードになる前の音量とプログラム設定に戻ります。

お客様のプログラム設定

最大4プログラム（メモリー）です。

右 耳	
プログラム	調整状態
1	
2	
3	
4	

お知らせ音		
音の種類	☐ メロディ	☐ 信号音
プログラムの切り替え	☐ 有効	☐ 無効
音量調節※ ¹	☐ 有効	☐ 無効
音量調節の限界※ ²	☐ 有効	☐ 無効
音量調節の開始位置	☐ 有効	☐ 無効
電池残量の警告	☐ 有効	☐ 無効
Bluetooth	☐ 有効	☐ 無効

左 耳	
プログラム	調整状態
1	
2	
3	
4	

お知らせ音		
音の種類	☐ メロディ	☐ 信号音
プログラムの切り替え	☐ 有効	☐ 無効
音量調節※ ¹	☐ 有効	☐ 無効
音量調節の限界※ ²	☐ 有効	☐ 無効
音量調節の開始位置	☐ 有効	☐ 無効
電池残量の警告	☐ 有効	☐ 無効
Bluetooth	☐ 有効	☐ 無効

※ 1 お知らせ音をメロディに設定していると音量が上がる際は高い音、音量が下がる際は低い音になります。

※ 2 音量が最大、または最小まで調節されたことをお知らせ音でお知らせします。

MEMO

.....
.....
.....
.....

補聴器のお手入れ

補聴器を長くお使いいただくために、日頃からのお手入れをお勧めします。

- 1 補聴器本体から電池を取り出します。
マグネット付きブラシ
- 2 本体と電池についた汚れや水分を乾いた布などで拭き取ります。
- 3 耳せんやイヤモールドなどの掃除の仕方は、取扱説明書を参照してください。

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、リオン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

販売業者

リオン株式会社
<https://www.rion.co.jp/>

本社／営業部
〒185-8533
東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器 お客様コールセンター
フリーダイヤル：0120-2933-76
受付時間：9:00～21:00

製造販売業者
WS オーディオロジージャパン株式会社
〒242-0007
神奈川県大和市中央林間 7-10-1
三機大和ビル 6F

販売名：補聴器 HB-T1 シリーズ