

聞こえ・目立ちにくさ・つけ心地、全てが日本品質。
日本人のための、
日本生まれの
補聴器です。



RIONETPRECIAII

リオネットプレシア ツー

RIONETPRECIAV

リオネットプレシア ツー

会話が聞きとりにくい、言葉がはっきりしない、と感じていませんか？



日本語の聞きとりにこだわった
リオネットプレシアⅡに、バリューモデル
のリオネットプレシアⅡ^{ファイ}Vが加わりました。
リオネットプレシアⅡシリーズは、「会
話が聞きとりにくい」、「言葉がはっきり

しない」などのお悩みをお持ちの方に、
ぜひお使いいただきたい補聴器です。
もっと会話を楽しんでいただくために。
ぜひ、リオネットプレシアⅡシリーズで
新しい聞こえを体感してください。




言葉の聞きとりに重要な「母音」に着目 1

音声は、母音と子音の組み合わせでできていますが、日本語を含め、多くの言語の聞きとりに、母音は重要な役割を果たしています。

私たちリオネットは、この母音に着目し、言葉の聞きとりにさらに磨きをかけた「SSS Speech+^{スピーチプラス}」を開発。この機能によって、言葉がより聞きとりやすくなります。



スピーチプラス
SSS Speech+の動作イメージ(音声「ウ」)

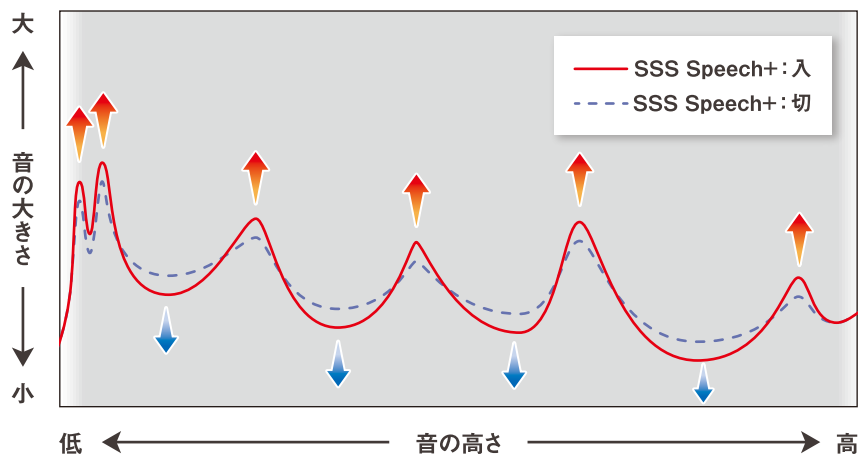

スピーチプラス
SSS Speech+は、音の成分の強い部分（↑）を強調し、弱い部分（↓）を弱くします。

開発者から皆様へ メッセージ

補聴器は、人と人をつなぐコミュニケーションツールでもあると考えています。

このコミュニケーションに重要である言葉をはっきり聞きたいという多くのお客様の願いにお応えするため、2009年にSSS（サウンド・スペクトル・シェイピング）機能を開発しました。

その後も、私たちはこの機能をさらに向上させるための研究を重ねてきました。今回開発

したSSS Speech+^{スピーチプラス}機能は、特に母音の特徴を強調するために、より低い周波数の成分まで強調処理を行っています。

また、効果の強さ設定についてもさらに検討を行い、適切な効果を感じていただけるようにしました。

リオネットプレシアIIシリーズは、「言葉がはっきりしない」という方にぜひお使いいただきたい、QOL（生活の質）向上のための補聴器です。

私たちは、リオネットプレシアIIシリーズで一人でも多くの方に笑顔をお届けしたいと願っています。



リオネット株式会社 医療機器事業部
開発部 補聴器開発三課

森本 隆司

聞こえにこだわった機能 2

騒がしい場所でも快適

エアコンや換気扇などの騒音を効果的に低減します。

不快なピーピー音を防ぐ

電話の際に起こりやすい不快なピーピー音(ハウリング)を自動的に起きにくくします。

不快な衝撃音を低減

食器を洗うときの「カチャカチャ」という音や、ドアを閉める音などの不快な衝撃音を低減します。

正面からの音を聞きとりやすくする

後方からの音を抑制することで、正面からの音声を聞きとりやすくします。さらに、適応型指向性では、背後や側面からの音が動いても、その音を追いかけて抑制します。

使用環境の記録・分析

補聴器が記録した使用環境を分析することで、より使いやすく、聞きやすい設定ができます。

※使用環境の記録・分析は、リオネットプレシアⅡのみに搭載されている機能です。

こだわりの国内生産 3

国内生産にこだわり、常に高い品質を提供します。

汗や湿気に強い「耐汗コート」 4

汗や湿気などから補聴器を守る「耐汗コート」が耐久性を高めます。さらに、防水性能をもった「スプラッシュ」なら、シャワーを浴びるときもお使いいただけます。



「おまかせ回路」で
電池交換が簡単

リオネット独自の「おまかせ回路」で、電池のプラス・マイナスの向きを気にせずに電池を交換することができます。



主な機能比較

	リオネットプレシアⅡ	リオネットプレシアⅣV
聴力に合わせて細かく調整	10バンド4チャンネル	6バンド4チャンネル
言葉をより聞きとりやすくする	★★★★	★★
騒がしい場所でも快適	★★★★	★★★★
不快なピーピー音を防ぐ	★★★★	★★★★
不快な衝撃音を低減	★★★★	★★
正面からの音を聞きとりやすくする	★★★★	★★
大きすぎる音をしっかり抑える	★★★★	★★
使用環境の記録・分析	★★★★	-

※機種ごとの機能については10～13ページをご参照ください。

5

隠す？ 魅せる？
選べるスタイル&カラー

耳穴に入れるオーダーメイドタイプや耳に
かける耳かけ型からお選びいただけます。
また、耳かけ型は豊富なカラーバリエー
ションをご用意。選ぶ楽しさが生まれます。

6

充実した保証制度

7

自然故障に対する無料修理制度や防水点
検プログラム、事故保険など、リオネットなら
ではの充実した保証制度を設けています。
※詳しくは15ページをご参照ください。



リオネットプレシアII

オーダーメイド



軽度 中等度 軽度 中等度 高度 軽度 中等度 高度

型式		HI-C3CS	HI-C1CS	HI-C2CS
		スーパーミニカナル極(CIC)	スーパーミニカナル(CIC)	カナルエイド
希望小売価格	片耳(1台)	218,000円	198,000円	198,000円
	両耳(2台)	370,600円 (1台あたり185,300円)	356,400円 (1台あたり178,200円)	356,400円 (1台あたり178,200円)
聴力に合わせて細かく調整		GAIN(利得調整器) 10バンド		
言葉をより聞きとりやすくする		◎	◎	◎
騒がしい場所でも快適		○	○	○
不快なピーピー音を防ぐ		○	○	○
不快な衝撃音を低減		◎	◎	◎
正面からの音を聞きとりやすくする		—	—	—
使用環境の記録・分析		○	○	○
スタート時間設定機能		○	○	○
スタートメモリー設定機能		—	○*3	○*3
電池交換お知らせ音		○	○	○
携帯電話ノイズ対策		○	○	○
おまかせ回路		○	○	○
耐汗コート		○	○	○
防水・防じん		—	—	—
誘導コイル		—	—	—
外部入力端子		—	—	—
オープンフィッティング		—	○	○
マルチメモリー機能		—	○*3	○*3
ミュート機能		—	○*3	○*3
主なオプション		チョコレート色のフェースプレート(無料) 対応機種: HI-C3CS		

●補聴器は非課税です。 *1 RIC:Receiver in the canal *2 RITE:Receiver in the ear *3 メモリー切替ボタン搭載時のみ *4 EXスモールイヤホンのみ
 ◎はリオネットプレシアIIよりも、より細かく調整できる機能です。



HI-G8CS	HB-J1CS	HB-W1CS	HB-G6CS	HB-A1CS
カナルエイド(指向性)	耳かけ型	耳かけ型	耳かけ型	耳かけ型
218,000円	188,000円	218,000円	178,000円	178,000円
370,600円 (1台あたり185,300円)	338,400円 (1台あたり169,200円)	370,600円 (1台あたり185,300円)	320,400円 (1台あたり160,200円)	320,400円 (1台あたり160,200円)
・CRC(ノンリニア調整器)4チャンネル・OPC(出力制限装置)10チャンネル				
◎	◎	◎	◎	◎
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	—	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
—	—	○	—	—
—	—	○	—	○
—	—	—	—	○
○	○*4	—	○	○*5
○*3	—	○	○	○
○*3	—	○	○	○
左右を分かりやすくした カラーシェル(無料) 対応機種: HI-C3CS、HI-C1CS メモリー切替ボタン 対応機種: HI-C2CS、HI-G8CS(無料) HI-C1CS(有料) FM補聴システム(有料)* 対応機種: HB-W1CS、HB-A1CS				

*5 Sチューブ、オープン耳せん(別売品) ※詳しくは販売店までお問い合わせください。

リオネット
プレシアⅡV

型式		HI-C3YS	HI-C1YS	HI-C2YS	HI-G8YS
希望小売価格		188,000円 (1台あたり169,200円)	168,000円 (1台あたり151,200円)	168,000円 (1台あたり151,200円)	188,000円 (1台あたり169,200円)
聴力に合わせて細かく調整		GAIN(利得調整器)6バンド			
言葉をはっきり聞きとりやすくする		○	○	○	○
騒がしい場所でも快適		○	○	○	○
不快なピーピー音を防ぐ		○	○	○	○
不快な衝撃音を低減		○	○	○	○
正面からの音を聞きとりやすくする		—	—	—	○
使用環境の記録・分析		—	—	—	—
スタート時間設定機能		○	○	○	○
スタートメモリー設定機能		—	—	—	—
電池交換お知らせ音		○	○	○	○
携帯電話ノイズ対策		○	○	○	○
おまかせ回路		○	○	○	○
耐汗コート		○	○	○	○
防水・防じん		—	—	—	—
誘導コイル		—	—	—	—
外部入力端子		—	—	—	—
オープンフィッティング		—	○	○	○
マルチメモリー機能		—	○*3	○*3	○*3
ミュート機能		—	○*3	○*3	○*3
主なオプション		チョコレート色のフェースプレート(無料) 対応機種: HI-C3YS			

●補聴器は非課税です。 *1 RIC:Receiver in the canal *2 RITE:Receiver in the ear *3 メモリー切替ボタン搭載時のみ *4 有料オプション

型式		HI-G7YS	HB-J1YS	HB-W1YS	HB-G6YS	HB-G9YS
マイエイド		168,000円 (1台あたり151,200円)	148,000円 (1台あたり133,200円)	178,000円 (1台あたり160,200円)	138,000円 (1台あたり124,200円)	128,000円 (1台あたり115,200円)
・CRC(ノンリニア調整器)4チャンネル・OPC(出力制限装置)4チャンネル		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
		—	○	○	○	—
		—	—	—	—	—
		○	○	○	○	○
		—	—	—	—	—
		○	○	○	○	○
		—	—	—	—	—
		○	○	○	○	○
		—	—	—	—	—
		○*4	—	—	—	○
		—	○*5	—	○	○*6
		○*3	—	○	○	○
		○*3	—	○	○	—
主なオプション		メモリー切替ボタン 対応機種: HI-C2YS、HI-G8YS、HI-G7YS(無料) HI-C1YS(有料)				

*5 EXスモールイヤホンのみ *6 Sチューブ、オープン耳せん(別売品) ※詳しくは販売店までお問い合わせください。

性能一覧

型式		HI-C3CS	HI-C1CS	HI-C2CS	HI-G8CS	－	HB-J1CS	HB-W1CS		HB-G6CS		HB-A1CS	－	
		HI-C3YS	HI-C1YS	HI-C2YS	HI-G8YS	HI-G7YS	HB-J1YS	HB-W1YS		HB-G6YS		－	HB-G9YS	
		スーパーミニ カナール極(CIC)	スーパーミニ カナール(CIC)	カナールエイト	カナールエイト (指向性)	マイエイト	EXスモール イヤホン	ミディアム イヤホン	EXパワー イヤホン	ミディアム イヤホン	Sチューブ	フック	フック	フック
最大音響 利得	HFA [±5dB]	32dB	41dB	47dB	47dB	58dB	38dB	41dB	61dB	42dB	40dB	55dB	56dB	56dB
	ピーク値 [+3dB以下]	36dB	46dB	51dB	51dB	65dB	42dB	45dB	67dB	46dB	54dB	59dB	64dB	62dB
90dB入力 最大出力 音圧レベル	HFA [±4dB]	106dB	107dB	117dB	117dB	126dB	104dB	113dB	124dB	114dB	111dB	125dB	125dB	127dB
	ピーク値 [+3dB以下]	111dB	112dB	119dB	119dB	132dB	110dB	116dB	129dB	116dB	124dB	130dB	132dB	132dB
誘導コイル入力の最大 感度レベル[±6dB]		－	－	－	－	－	－	－	96dB	77dB	－	－	89dB	89dB
電池		PR536	PR536	PR41	PR41	PR48	PR41	PR41	PR48	PR48	PR41	PR41	PR48	PR48
電池寿命(時間)*		約95～115	約105～155	約160～235	約150～205	約310～370	約235	約190	約350	約325	約180	約190	約240	約265
適応難聴*		軽度・ 中等度	軽度・ 中等度・高度	軽度・ 中等度・高度	軽度・ 中等度・高度	中等度・ 高度・重度	軽度・ 中等度	軽度・ 中等度・高度	中等度・ 高度・重度	軽度・ 中等度・高度	軽度・ 中等度・高度	軽度・ 中等度・高度	軽度・ 中等度・高度	軽度・ 中等度・高度
		25～75dBHL	～80dBHL	～90dBHL	～90dBHL	50～110dBHL	～70dBHL	25～85dBHL	50～100dBHL	25～85dBHL	～80dBHL	～95dBHL	～95dBHL	～100dBHL
		伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

●測定値はJIS C 5512:2015による。(※を除く) ●[]内は許容差を表します。 ●電池寿命は使用条件により異なります。

カラーバリエーション

HB-J1CS HB-J1YS							
HB-G6CS HB-G6YS							
HB-A1CS							
	プラチナ シルバー	シャンパン ゴールド	シルキー ベージュ	コーヒー ブラウン	プレミアム ブラック	ピンク サファイア	ブルー サファイア
HB-G9YS							
	フレッシュ グレー	ベージュ	カフェラテ	チョコ レート	シャドウ ブラック	ローズ ピンク	スカイブルー
SPLASH HB-W1CS HB-W1YS							
	ケース 3色	マイク カバー 9色	ナチュラル ホワイト	ベージュ	シャドウ ブラック	パッション レッド	マリン ブルー
	グレー	ベージュ	クールグレー	チョコレート	フォレスト グリーン	ローズ ピンク	

リオネットならではの充実した保証制度

2年間の無料修理	お買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。 (ただし、スブラッシュの防水性能保証は1年)
120日以内の無料調整 (オーダーメイド補聴器)	お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。
120日以内の無料再製作 (オーダーイヤチップ)	お買い上げの日より120日以内に、オーダーイヤチップの形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも再製作いたします。
防水点検プログラム (スブラッシュ)	お買い上げ時の防水性能保証の終了後も、お買い上げから2年間で1回の「防水点検」を無料で受けられるサービスです。「防水点検」の防水性能保証期間は最大で1年間です。詳しい内容は販売店までお問い合わせください。
火災・盗難などに あったときの事故保険	補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

本 社 ・ 営 業 部	東 京 都 国 分 寺 市 東 元 町 3 - 2 0 - 4 1 TEL.042-359-7880 FAX.042-359-7441	〒185-8533
東 京 営 業 所	東 京 都 文 京 区 本 郷 2 - 2 7 - 8 (太 陽 館 ビル) TEL.03-3818-4133 FAX.03-3818-4140	〒113-0033
仙 台 営 業 所	仙 台 市 太 白 区 南 大 野 田 2 5 - 1 3 TEL.022-249-5533 FAX.022-249-5535	〒982-0015
西 日 本 営 業 所	大 阪 市 北 区 梅 田 2 - 5 - 5 (横 山 ビル) TEL.06-6363-4133 FAX.06-4797-0111	〒530-0001
国分寺補聴相談室	東 京 都 国 分 寺 市 東 元 町 3 - 2 0 - 4 1 TEL.042-359-7833 FAX.042-359-7440	〒185-8533
新宿補聴相談室	東 京 都 渋谷区代々木2-7-7 (南新宿277ビル) TEL.03-3379-9333 FAX.03-3379-2564	〒151-0053
大阪補聴相談室	大 阪 市 北 区 梅 田 2 - 5 - 5 (横 山 ビル) TEL.06-4797-0033 FAX.06-4797-0111	〒530-0001
関 東 リ オ ン (株)	さ い た ま 市 浦 和 区 仲 町 3 - 1 1 - 2 TEL.048-824-1205 FAX.048-824-8885	〒330-0062
東 海 リ オ ン (株)	名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 9 (スカイオアシス栄ビル) TEL.052-954-1733 FAX.052-954-1734	〒460-0004
九 州 リ オ ン (株)	福 岡 市 博 多 区 冷 泉 町 5 - 1 8 TEL.092-281-5361 FAX.092-291-2847	〒812-0039

⚠️ ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング (調整) することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング (調整) によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名:補聴器HI-C3CS 医療機器認証番号:226AABZX00004A02
販売名:補聴器HI-C1CS 医療機器認証番号:223AABZX00067A04
販売名:補聴器HI-C2CS 医療機器認証番号:224AABZX00189A03
販売名:補聴器HI-G8CS 医療機器認証番号:224AABZX00190A02
販売名:補聴器HB-J1CS 医療機器認証番号:225AABZX00098A03
販売名:補聴器HB-W1CS 医療機器認証番号:225AABZX00110A03
販売名:補聴器HB-G6CS 医療機器認証番号:223AABZX00066A03
販売名:補聴器HB-A1CS 医療機器認証番号:224AABZX00191A01

販売名:補聴器HI-C3YS 医療機器認証番号:226AABZX00004A03
販売名:補聴器HI-C1YS 医療機器認証番号:223AABZX00067A05
販売名:補聴器HI-C2YS 医療機器認証番号:224AABZX00189A04
販売名:補聴器HI-G8YS 医療機器認証番号:224AABZX00190A03
販売名:補聴器HI-G7YS 医療機器認証番号:225AABZX00096A02
販売名:補聴器HB-J1YS 医療機器認証番号:225AABZX00098A04
販売名:補聴器HB-W1YS 医療機器認証番号:225AABZX00110A04
販売名:補聴器HB-G6YS 医療機器認証番号:223AABZX00066A04
販売名:補聴器HB-G9YS 医療機器認証番号:228AABZX00018000

🌱 この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

※ このカタログ掲載の商品の希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

※ このカタログ掲載の商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

※ このカタログ掲載の商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。

※ 本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。



GREEN

2016 06 40K DZ