RIONET

Auracast ™ブロードキャスト オーディオの開始方法

取扱説明書

もくじ

1 Auracast ブロードキャストオーディオとは 2

2 この取扱説明書について 3

3 Auracast ブロードキャストオーディオの開始 4

3.1 周囲の Auracast 送信機を探す 5

3.2 パスワードが必要な場合 7

3.3 QR コードから開始する場合 8

4 Auracast ブロードキャストオーディオの停止 9

5 うまくいかないときには 10

1 Auracast ブロードキャストオーディオとは

Auracast ブロードキャストオーディオは、Bluetooth® の新しい規格である LE Audio の機能のひとつで、Auracast に対応した送信機から、複数の受信機へ同時に音声をストリーミングできる技術です。
公共施設などに設置されている Auracast に対応した送信機から届くクリアな音声を、ご自身の補聴器で聞くことができます。

- Auracast に対応した補聴器で利用できます。
- ご利用には、LE Audio および Auracast アシスタント機能に対応したスマートフォンが必要です。
- Auracast ブロードキャストを開始する際に、リオネット補聴器が提供する専用アプリ上での操作は必要ありません。

ノート

Auracast は登場したばかりの新しい技術です。Auracast に対応した送信機によって動作が異なる場合があり、すべての送信機での動作を保証するものではありません。
また、設置施設の状況や、補聴器の設定によって聞こえ方が異なる場合があり、効果を保証するものではありません。

2 この取扱説明書について

Auracast アシスタントに対応したスマートフォンと補聴器が、ペアリングおよび接続済みであることを前提に、Auracast ブロードキャストオーディオの開始方法について説明します。

3 Auracast ブロードキャストオーディオの開始

補聴器で Auracast ブロードキャストオーディオを開始するには、LE Audio および Auracast アシスタント機能に対応したスマートフォンが必要です。
あらかじめ、スマートフォンと補聴器をペアリングし、接続しておきます。

※ 本書では、Google Pixel（Android ™ 16）の操作画面を例に説明します。操作方法や Auracast メニューの表示は、スマートフォンの機種によって異なる場合があります。

3.1　周囲の Auracast 送信機を探す

以下の手順で、Auracast ブロードキャストオーディオを補聴器で聞くための設定をします。


1 ホーム画面またはアプリ一覧から「設定」のアイコンをタップして、設定画面を開きます。

2 「接続設定」をタップします。


3 メディアデバイスに、接続済みの補聴器の機種および製造番号が表示されていることを確認し、右側の「⚙」アイコンをタップします。





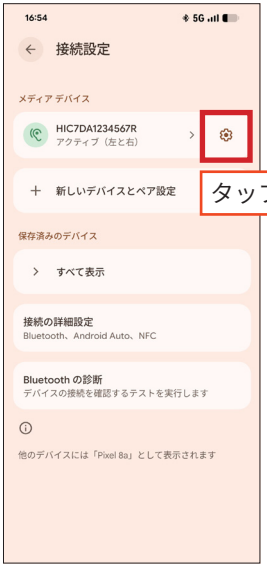

4 「音声ストリームを探す」をタップします。

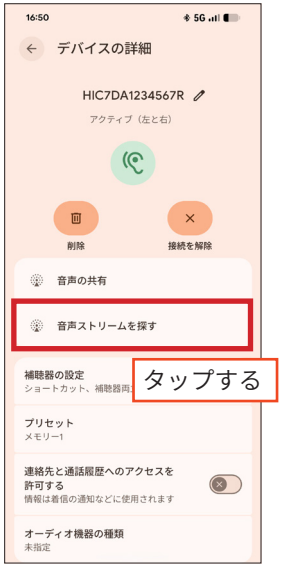

5 周囲の Auracast送信機が表示されます。聞きたい Auracast 送信機の名前をタップします。



6 補聴器で Auracast ブロードキャストオーディオが開始されます。



3.2　パスワードが必要な場合

聞きたい Auracast 送信機をタップすると、パスワードの入力を求められる場合があります。
以下の画面は、「3.1　周囲の Auracast 送信機を探す」の手順 4 の操作後に表示されます。




ノート

パスワードが不明な場合は利用できません。パスワードについては、Auracast 送信機のメーカーまたは設置施設の管理者にお問い合わせください。

3.3　QR コードから開始する場合

QR コードから開始する場合は、以下の手順で Auracast ブロードキャストオーディオを開始します。
手順 1 の画面は、「3.1　周囲の Auracast 送信機を探す」の手順 4 の操作後に表示されます。

1 「音声ストリームを探す」の画面を開き、「QRコードをスキャン」をタップします。

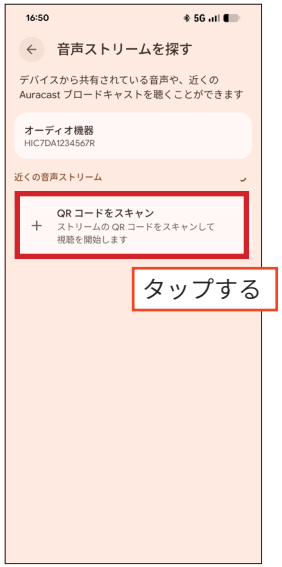

2 スマートフォンのカメラを QR コードに向けて、QR コードをスキャンします。



3 補聴器で Auracast ブロードキャストオーディオが開始されます。




4 Auracast ブロードキャストオーディオの停止

以下の手順で Auracast ブロードキャストオーディオを停止します。
手順 1 の画面は、「3.1　周囲の Auracast 送信機を探す」の手順 4 の操作後に表示されます。

1 「音声ストリームを探す」の画面を開き、再生中の Auracast 送信機の名前をタップします。

2 「接続を解除」をタップします。

3 Auracast ブロードキャストオーディオが停止されます。

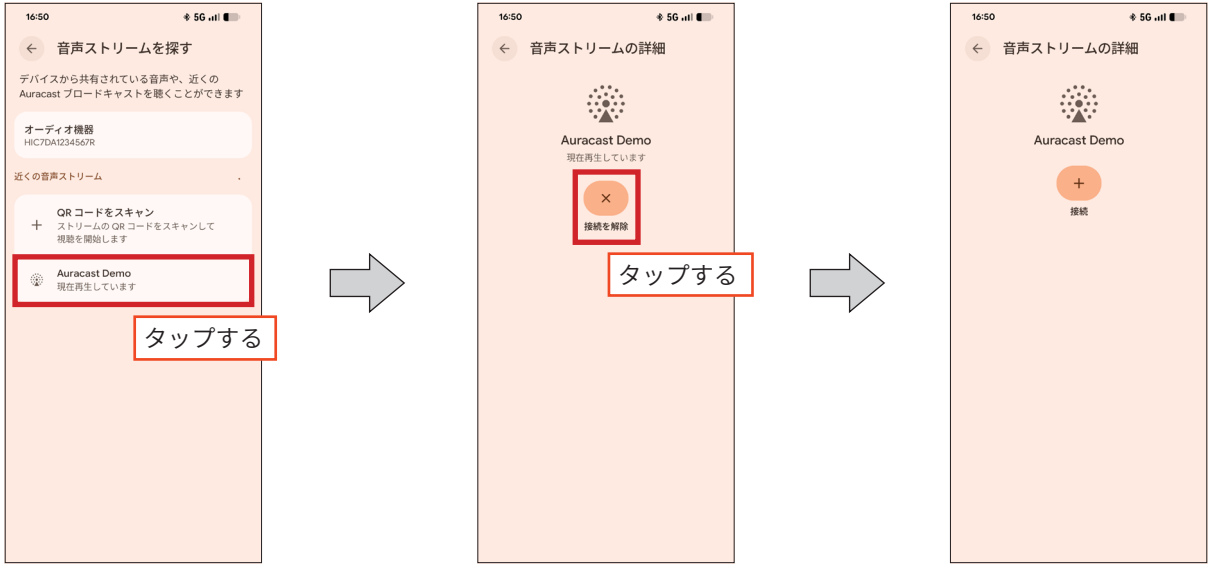

5 うまくいかないときには

通信環境により、Auracast ブロードキャストオーディオがうまく開始、停止されない場合があります。
この場合は、以下をご確認ください。

- Auracast 送信機との距離が離れすぎていないか、また、障害物がないか確認してください。
- 設置施設の管理者にストリーミングが正常に配信されているか確認してください。
  Auracast 送信機側に不具合がある可能性もあります。

上記 2 点を確認しても正常に動作しない場合は、以下をお試しください。

- スマートフォンの Bluetooth 機能の再起動（スマートフォンの Bluetooth 機能を OFF にして、再度 Bluetooth 機能を ON にする）
- 補聴器の再起動
- 補聴器の再ペアリング（スマートフォンと補聴器のペアリングを削除してから、再度ペアリングする）
- スマートフォンの再起動

商標について

- 本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。
- Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Auracast ワードマークおよびロゴは商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。リオン株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- Google、Android、Chrome、Pixel は Google LLC の商標です。
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

リオン株式会社

https://www.rion.co.jp/

本社／営業部
〒 185-8533　東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオネット補聴器お客様コールセンター
フリーダイヤル 0120-2933-76
受付時間：9:00～21:00

No. HAM00009-01